

wau



MAMI

MICROCURRENT & PHOTOTHERAPY MASSAGER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	7
Чистка	9
Хранение	9
Зарядка	10
Меры предосторожности	11
Утилизация.....	12
Гарантия.....	12




Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	ST-H313
Номинальное рабочее напряжение	5-9 В
Номинальное напряжение питания	3,7 В
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	900 мАч
Материал	ABS пластик, цинковый сплав
Размеры	Устройство — 147,1x83x44,4 мм Подставка — 57,1x57,1x76 мм
Вес	Устройство — 179 гр Подставка — 108 гр
Время зарядки	3 часа
Время работы	Режим красного света/ синего света — 200 мин Режим смешанного света — 300 мин
Режимы	Микроток (3 уровня) + Фототерапия (3 света) + Вибрация (опционально)

Назначение

Лифтинг массажер для лица и шеи MAMI от бренда WAU — это девайс, который использует усовершенствованную технологию микротоковой терапии. 3 уровня интенсивности микротоков в сочетании с низкочастотной вибрацией, красным, синим и смешанным светом LED терапии улучшают впитывающую способность кожи и подтягивают ее. Результатом использования MAMI будет здоровая, эластичная, глянцевая кожа.

Детали устройства

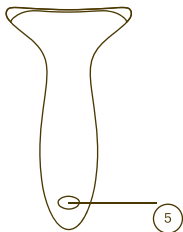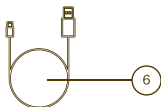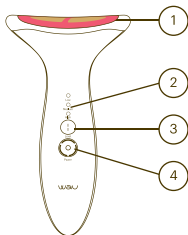

1. Массажная поверхность
2. Индикатор уровня интенсивности микротоков/индикатор зарядки
3. Кнопка LEVEL — регулирование интенсивности микротоков/вкл-выкл вибрации


4. Кнопка POWER — вкл-выкл/кнопка переключения режимов/индикатор режима
5. Разъем для зарядки
6. Кабель для зарядки USB-Type C
7. Подставка

Комплектация

Массажер x1
Подставка x1
Зарядный кабель x1
Инструкция x1
Мешочек для хранения x1
Салфетка x1

Порядок работы

1. Данное устройство имеет 3 режима по типу света фототерапии и 3 уровня интенсивности микротоков.
2. Чтобы включить устройство нажмите и удерживайте кнопку POWER. Кнопка POWER также позволяет выбирать тип света для фототерапии.
3. После включения массажера кнопка LEVEL позволяет выбрать уровень интенсивности микротоков от слабого до сильного (короткое нажатие) или включить/ отключить вибрацию (длительное нажатие).
4. Чтобы выключить девайс нажмите и удерживайте кнопку POWER.

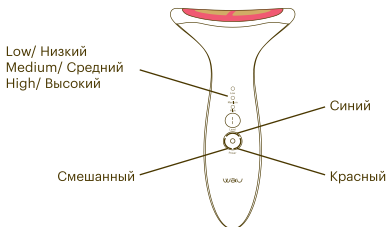


Смарт-таймер: устройство автоматически выключится после 10 минут работы.

Способ применения

Шаг 1:

Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы включить массажер. Коротким нажатием на данную кнопку определите режим фототерапии.

Автоматически самым первым включается синий свет, повторное нажатие позволяет выбрать красный свет, чтобы включить режим смешанного света нажмите кнопку POWER еще раз.

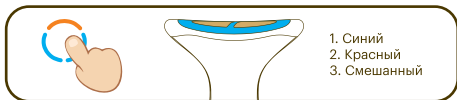

Шаг 2:

Коротким нажатием на кнопку LEVEL определите уровень воздействия микротоков.

Уровень интенсивности микротоков регулируется от слабого к среднему и до самого сильного.

Слабый уровень — горит 1 индикатор (Low)

Средний уровень — горят 2 индикатора (Low + Medium)

Сильный уровень — горят 3 индикатора (Low + Medium + High)

При помощи длительного нажатия на кнопку LEVEL включите вибрацию. Такое же длинное нажатие позволяет отключить вибрацию.


Шаг 3:

Нанесите на кожу массажный гель-проводник. Приложите массажную поверхность устройства к коже лица.

Шаг 4:

Проведите массаж лица по линиям, указанным на рисунке, двигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу).

Проведите массаж по массажным линиям повторно от трех раз. Не рекомендуется работать устройством более 10 минут.

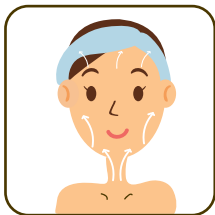

Эффект от использования и особенности каждого из режимов:

1. Микроток воздействует на мышечные волокна и лимфатические каналы. За счет тонизации лицевых мышц улучшается кровообращение, что позволяет насытить клетки коллагеном. В результате происходит разглаживание морщин и подтяжка кожи.

Проработка микротоком лимфатических каналов способствует выведению лишней жидкости и токсинов, за счет чего улучшается тонус и цвет кожи.

Общий эффект от использования микротоков — это стимуляция процессов обновления кожи.

2. Фототерапия.

Синий свет. Борется с акне, осветляет кожу, сужает поры, восстанавливает чувствительную кожу, регулирует образование кожного сала.

Красный свет. Стимулирует систему циркуляции крови и лимфатическую систему, активизирует митохондрии в клетках. Специфическая длина волны красного света помогает преобразовать энергию света в клеточную энергию, нейтрализовать свободные радикалы, появляющиеся в клетках. Красный свет запускает производство фибробластов, которые в свою очередь продуцируют коллаген. Данные процессы запускают ускорение циркуляции крови, что позволяет разгладить морщины и увлажнить кожу изнутри.

Смешанный свет. Сочетает в себе функционал красного и синего света.

3. Вибрация.

Подключение вибрации позволит промассировать и подтянуть кожу, сократить проявленность тонких линий и морщин.



[Примечание]: проводить массаж с использованием девайса MAMI можно до 4-5 раз в неделю.

Чистка

Внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по обслуживанию девайса — это обеспечит его корректную работу. При несоблюдении данных рекомендаций эффективность использования массажера и качество его работы будут снижены.

Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено.

- Для очищения девайса используйте только сухие ткани.
- Для чистки массажера не используйте металлические мочалки, чистящие средства, содержащие абразивы, а также коррозионные жидкости, такие как спирт или ацетон.
- Тщательно очищайте устройство и проверяйте его работоспособность после каждой чистки.
- Не мойте девайс под проточной водой, не погружайте его в воду.
- Убедитесь, что все части девайса вытерты насухо перед тем, как подсоединять его к зарядке.

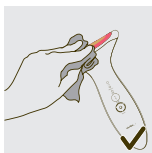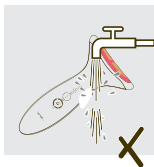

Хранение

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

1. Зарядка через компьютер с помощью USB кабеля: включите компьютер, подсоедините кабель USB к USB порту компьютера, а другой конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к устройству, чтобы начать зарядку.

2. Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB к розетке адаптера. Второй конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к разъему в устройстве.

Характеристики адаптера: 5В = 1А.

3. Во время подзарядки все 3 индикатора (уровня интенсивности микро-токов) мигают, при достижении полного заряда они будут гореть постоянно.



[Внимание]: перед подзарядкой убедитесь, что разъем для зарядки, который расположен на устройстве, сухой, не содержит воды и не загрязнен косметическими продуктами.

Пожалуйста, не заряжайте массажер в местах, где он может попасть в воду. Не используйте устройство во время зарядки. Время зарядки девайса не должно превышать 24 часов. Пожалуйста, минимум раз в 2 месяца заряжайте массажер полностью на 100% — это позволит продлить срок службы аккумулятора.

Просим вас использовать кабель, который идет в комплекте с массажером.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием массажера и сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

Опасно

- Сохраняйте разъем зарядки и провод USB сухими. Никогда не погружайте их в воду.
- Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, работающим душем, рядом с полным бассейном воды).
- Не бросайте устройство в огонь.

Внимание

- Используйте устройство только с тем USB-кабелем, который идет в комплекте с данным массажером.
- Во избежание получения травмы не используйте массажер, USB-кабель, если они сломаны или повреждены.
- Если USB-кабель поврежден, заменяйте его только оригинальным проводом, чтобы избежать опасности.
- Подзаряжайте массажер полностью на 100% минимум раз в 2 месяца — это позволит продлить срок службы аккумулятора.
- Это устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, или тем, кто не имеет опыта использования или осведомленности о работе подобных массажеров, до тех пор пока им не будет оказано личное сопровождение или инструктаж по девайсу.

С осторожностью

- Используйте устройство только по назначению.
- Заряжайте/ используйте/ храните массажер при температуре от 5 до 40°C, от 35 до 95°F.
- Не используйте девайс, если ваша кожа проходит этап заживления после косметических процедур таких как косметический или химический пилинги, лазерная шлифовка, фракционное лазерное омоложение, мезотерапия или после использования дермальных филлеров в последние две недели.

Общие рекомендации

- Регулярная чистка устройства обеспечивает результативную работу и длительный срок использования девайса.

— Не используйте массажер во время сна или в состоянии дремоты.

Прочие предупреждения

— Не прикладывайте аппарат напрямую к уху. Это может вызвать временную потерю слуха.

— Не используйте данное устройство, если у вас есть проблемы со здоровьем ушей (наружный отит, ушная инфекция, прочие заболевания).

— Не используйте массажер на потрескавшейся коже, при наличии открытых ран, на проблемной или раздраженной коже (коже страдающей от тяжелого акне, солнечного ожога, от инфекции и пр.).

— Не используйте устройство при наличии кардиостимулятора, имплантов или металлических протезов.

— Не используйте устройство на чувствительной области вокруг глаз, так как кожа там тонкая и деликатная.

— Не используйте девайс на слизистой (например, внутри носа, рта, в области гениталий), так как это может вызвать местное раздражение.

— Не используйте данный прибор при наличии заболеваний щитовидной железы или при приеме лекарств для лечения щитовидной железы.

Утилизация



Не выбрасывайте данное устройство вместе с ежедневными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте данный массажер в соответствии с нормами локального законодательства или сдайте в центр переработки отходов.

Гарантия

Благодарим Вас за приобретение лифтинг массажера для лица и шеи MAMI от бренда WAU. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

MAMI

ЛИФТИНГ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Артикул: **ST-H313**

Материал: **ABS пластик, цинковый сплав, нержавеющей сталь**

Размер: (ВхШхГ) **147х83х44 мм**

Вес: **179 гр**

Напряжение: **3.7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А. Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.

8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

